

Sicherheit im Blick



MOBELI®
Das innovative Original.



KippStopp.
Das Sicherheitsschloss.

MOBELI Produkte erhalten Sie im guten Fachgeschäft.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanleitung und im Internet unter:
www.mobeli.de/download-bereich

ROTH®

Roth GmbH
Kohlbergstr. 5
D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23



02/2025
Änderungen vorbehalten.
DI4.827.25.01

Kennen Sie unser Video? Sie finden es unter

www.mobeli.de

Sie erreichen uns unter info@mobeli.de

Zubehör

(1) **Kipphebelverlängerung:** Die Mobeli Kipphebelverlängerung reduziert den Kraftaufwand beim Umlegen des Kipphebels auf weniger als die Hälfte.

(2) Die **Kipphebelsicherung** ist ein Sicherheitsschloss. Mit diesem Sicherheitsschloss können Sie den Mobeli Haltegriff einfach „abschliessen“. Vergleichbar mit einem Vorhängeschloss.

(3+4) Ihre Fliesen sind nicht poren dicht oder haben kein Mindestmaß von 14 x 14 cm? **Selbstklebende Mobeli Edelstahlplatten** werden einfach dort aufgeklebt, wo Sie - fester Untergrund vorausgesetzt - den Mobeli Haltegriff anbringen möchten.



	Best. Nr.
Kipphebelverlängerung	1400574
Kipphebelsicherung	1400672
Edelstahlplatten (selbstklebend)	
Paar klein (145 x 145 mm)	1461414
Paar groß (145 x 295 mm)	1461418

9



QuattroPower Stütz (QP). Ruck-Zuck festen Halt ohne Bohren. Sie positionieren das QuattroPower-Stützsystem, legen die Kipphebel um, fertig. Die QuattroPower Stütz Haltesysteme sind für ein maximales Benutzergewicht von 80 kg ausgelegt.

Das Stützsystem QuattroPower Stütz verteilt mit seinen 4 Saugtellern die auf die Wand wirkenden Hebelkräfte. Vorteil: Es kann sogar an gefliesten Hohlraumwänden mit 2-lagiger Gipskarton Beplankung und UA Profil (mit 50 mm Stärke) befestigt werden. Teure Umbauten zur Wandverstärkung für geschraubte Griffe sind nicht nötig.



10

Stützsysteme

Sehr beliebt in Wandnähe ist die Kombination von einem QuattroPower Stützgriff und einem klassischen Mobeli Haltegriff (Festmaß oder Teleskop).

Je nach Wunsch und den räumlichen Gegebenheiten, kann dieses Stützsystem z.B. beidseitig am WC aufwärts und/oder abwärts angebracht werden. Bei einer Befestigung nach oben gewinnt man eine zusätzliche Möglichkeit zum Abstützen oder Hochziehen. Unsere QP Stützsysteme bieten eine Vielzahl von Befestigungsvarianten und erlauben eine Verwendung bei teils völlig neuen Aufgaben wie z. B. bei der Physiotherapie.

Platzsparende Minimallösung: Sie können den QP zu einem einfachen Haltegriff mit 4 Saugern umstecken. Der Stützgriff ist mit 26 mm Griffstangendurchmesser für Kinder oder mit 35 mm in der Standardausführung erhältlich.



	Best. Nr.
QuattroPower Stütz	80 kg 1400265S
QuattroPower Stütz + Griffhorn	80 kg 1400266S
QuattroPower Stütz Kid	60 kg 1400268S
QuattroPower Stütz Kid + Griffhorn	60 kg 1400269S

11



QuattroPower Wanne. Optimiert für die Badewanne: Das Mobeli Stützsystem QuattroPower Wanne eignet sich hervorragend für den Wannenein- und ausstieg. Es hält hohen Zug- und Stützbelastungen stand.

Ergreifen Sie mit beiden Händen vor dem Ein- oder Ausstieg die Griffstange und lassen diese erst wieder los wenn Sie sicher sitzen bzw. fest stehen.


Übrigens: Der QuattroPower Wanne kann auf der Außen- oder Innenseite angebracht werden. Der Saugkopf hält auch unter Wasser.



	Best. Nr.
QuattroPower Wanne*	80 kg 1400263S
QuattroPower Wanne* + Griffverlängerung	80 kg 1400264S
QuattroPower Wanne	80 kg 1400261S
QuattroPower Wanne + Griffverlängerung	80 kg 1400262S

*für schmale Wannen

12

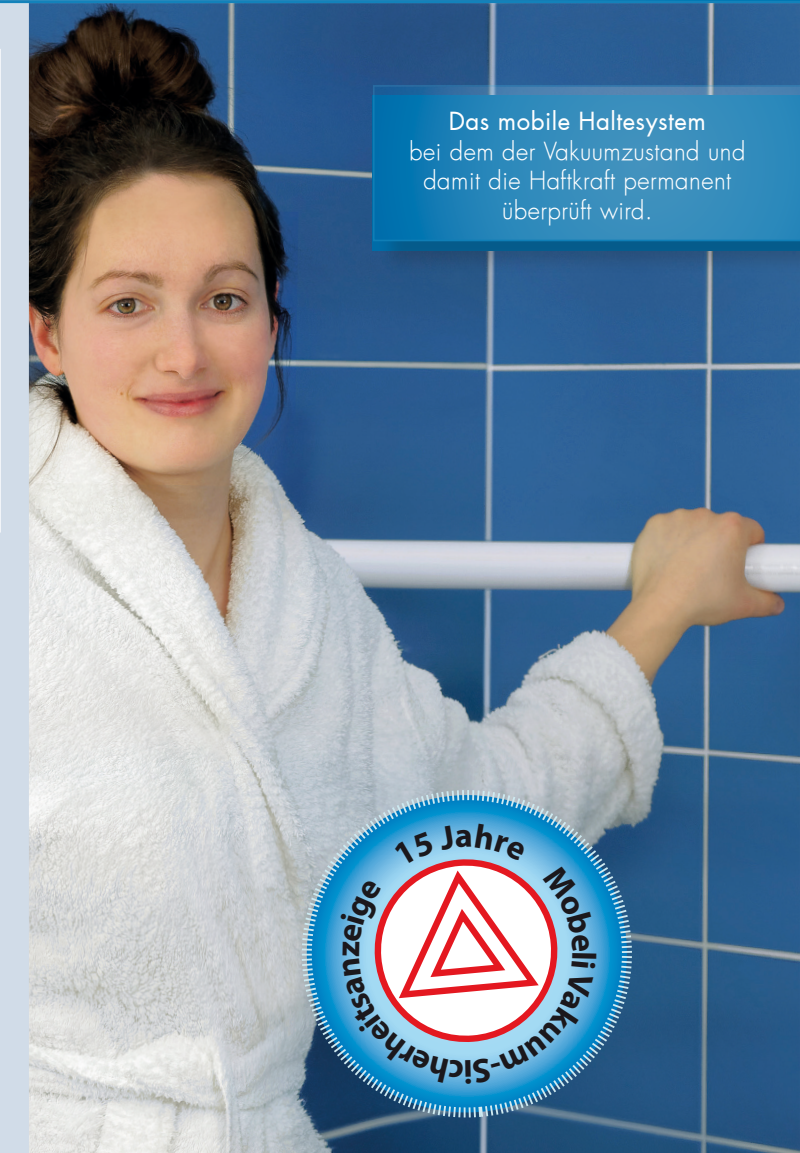

Das mobile Haltesystem bei dem der Vakuumzustand und damit die Haftkraft permanent überprüft wird.



MOBELI®

Mobile Haltegriffe - genial einfach und sicher.

Mobile Haltegriffe

Mobil leben. Barrieren überwinden.

Das patentierte System Mobeli von ROTH ist eine praktische Hilfe, die sich im Alltag von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bewährt hat. Die mobilen Griffe sind schnell und komfortabel anzubringen und ebenso leicht wieder zu lösen. Die beiden Saugköpfe mit je 120 mm Durchmesser einfach auf eine plane, poredichte Fläche andrücken, die Vakuum-Kipphobel umlegen - fertig.

Alle Haltegriffe sind hervorragend verarbeitet und vom TÜV-Süd geprüft, haben eine enorm hohe Haftkraft und sind in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Die edlen CHROMLOOK Premium Haltegriffe besitzen eine besonders griffige Tropfen-Perl-Struktur und passen optisch hervorragend zu anderen Chrom-Badarmaturen.

Handgrifflänge mm		Best. Nr.
1-Hand-Griff	110	105 kg 1400220S
2-Hand-Griff	210	100 kg 1400225S
2-Hand-Griff	350	95 kg 1400226S
2-Hand-Griff	650	95 kg 1400227S
2-Hand-Teleskopgriff	220-345	85 kg 1400221S
2-Hand-Teleskopgriff	340-465	85 kg 1400222S
2-Hand-Teleskopgriff	440-565	85 kg 1400223S
2-Hand-Teleskopgriff	665-790	80 kg 1400224S
CHROMLOOK Premium Version:		
2-Hand-Griff	350	95 kg 1400226SCL
2-Hand-Griff	650	95 kg 1400227SCL

Die mobilen Haltegriffe sind entwickelt, um die natürliche Bewegung zu unterstützen. Sie sind nicht konstruiert um das gesamte Körpergewicht zu tragen. Alle MOBELI Haltegriffe wurden vom TÜV Süd nach der aktuellsten Norm ISO17966:2016 erfolgreich getestet. Die Belastbarkeit ist mit dem max. Benutzergewicht angegeben. In dieser Norm ist gefordert, dass eine Sicherheitsanzeige die Restkraft des Haltegriffs anzeigen muß. Die Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige erfüllt diese Verpflichtung und ist damit auf dem „Stand der Technik“ für Medizinprodukte.

MOBELI®

Saugkopf

Die innere Verzahnung von Saugscheibe und Gehäuse führt zu einer erheblich höheren Haltekraft. Die aus speziellem Gummi gefertigten Saugscheiben halten sogar auf leicht strukturierten Bad- und WC-Fliesenflächen.



Teleskopgriff

Damit Sie den Haltegriff unabhängig vom Fliesenformat anbringen können, haben wir diesen Teleskopgriff entwickelt. Die Griffe sind aus einem extrem hochschlagfesten und zähen Kunststoff.

Schnellverriegler

Alle Mobeli Haltegriffe können ohne Werkzeug problemlos zusammengesteckt und für die Reise leicht zerlegt werden. Wie alle Metallteile des Systems Mobeli ist der Schnellverriegler aus Edelstahl gefertigt.

Vakuum Sicherheitsanzeige

Diese Innovation ist schlicht revolutionär. **Der weltweit erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand - und damit die Haftkraft - gemessen wird.** Denn die Mobeli Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die Warn-Wippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist voll belastbar. Fährt die Warn-Wippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar, muss der Mobeli Haltegriff gelöst und erneut angesaugt werden. Auch geeignet für Personen mit Sehschwäche, denn die Warn-Wippe ist bei Vakuumverlust gut tastbar. MOBELI hat dadurch den „Sicherheitsstandard der Technik“ für mobile Haltegriffe gesetzt.

CE Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind Konform mit der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Sicherheitsanzeige

Mobil und sicher. Denn Sicherheit geht vor.

Mobeli ist das Original unter den mobilen Haltegriffen. Unsere Produktfamilie wird ständig weiterentwickelt. Alle Haltegriffe des Systems Mobeli aus dem traditionsreichen Unternehmen ROTH werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Mobeli-Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft.



Bei versenkter Sicherheitswippe kann der Haltegriff mit dem vollen (für jeden Griff jeweils einzeln angegebenen) maximalen Benutzergewicht belastet werden.



Wird der rote Seitenrand der Sicherheitswippe sichtbar muss der Haltegriff gelöst und erneut angebracht werden. Das Prinzip: Bei Vakuumverlust fährt die Sicherheitswippe aus. Es besteht zwar noch eine reduzierte Haltekraft, aber der Griff erreicht nicht mehr die im maximalen Benutzergewicht angegebene Haltekraft. Also einfach den Haltegriff lösen und neu fixieren.

Reisefreudig. Unsere mobilen Haltegriffe lassen sich einfach zerlegen. Sie benötigen nur wenig Platz in Ihrem Gepäck, sind am Reiseziel schnell wieder zusammengesteckt und dann sofort einsatzbereit - ohne Werkzeug.



QuattroPlus

Mehr Mobilität. Zuhause und Unterwegs.



Hochlast-Variante: Der mobile QuattroPlus kann an der Wand und über Eck befestigt werden, er dient als Haltegriff und als Umsetzhilfe. Der QuattroPlus kann wegen seiner hohen Belastbarkeit auch von schwereren Personen genutzt werden.

Dank des integrierten Kreuzgelenkes (360° drehbar) ist es möglich, den QuattroPlus sogar an den Zargen einer Zimmertür zu befestigen. Voraussetzung ist ein fester, poredichter, planer Befestigungsuntergrund wie z.B. bei Metallrahmen. Das maximale Benutzergewicht bis 160 kg wird dadurch nicht beeinträchtigt.



Handgrifflänge mm		Best. Nr.
QuattroPlus	200-325	160 kg 1400241S
QuattroPlus	320-445	160 kg 1400242S
QuattroPlus	420-545	160 kg 1400243S
QuattroPlus	645-770	150 kg 1400244S


Handlauf

Flexibel - der Winkelverstellbare Handlauf

Der Winkelverstellbare Handlauf ist die optimale Hilfe für ein barrierefreies Bad. Durch die einzigartige Horizontal-Vertikal-Kombination ist der mobile Handlauf in vielen Alltagssituationen hilfreich, sei es in der Badewanne beim Aufrichten oder als Haltehilfe in der Dusche. Der große Aktionsradius und seine Vielseitigkeit sind die Stärken unseres mobilen Handlaufs.

Die Barrierefrei DIN 18040 (in 5.3.5.) fordert für Duschkabine neben einem waagerechten Haltegriff in 85 cm Höhe auch einen vertikalen Haltegriff; der Winkelverstellbare Handlauf erfüllt all diese Anforderungen in einer Lösung, rechts- und linksseitig.

Aus dem Handlauf lässt sich in nur wenigen Sekunden ein Haltegriff für unterwegs machen.

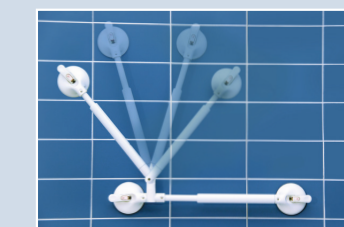

Handgrifflänge mm		Best. Nr.
Winkelverstellbarer Handlauf	340-465	85 kg 1400222H2S
Winkelverstellbarer Handlauf	440-565	85 kg 1400223H3S
Winkelverstellbarer Handlauf	350	95 kg 1400226H6S
Winkelverstellbarer Handlauf	650	95 kg 1400227H7S

